



脈衝離子美容儀/美顏動力光系列  
中文說明書

# BeautyU

Specialized auxillary equipment for beauty





MS-05 Ozone cleansing device

MS-05a Photo-dynamic therapy device

BeautyU

## 產品外觀簡介 (MS-05及MS-05a)

1. 按摩頭 (MS-05 脈衝離子美容儀  
動力光 (MS-05a 美顏動力光系列)
2. 散熱孔
3. 三段式開關
4. 電源接頭或電源線
5. 上蓋
6. 下蓋

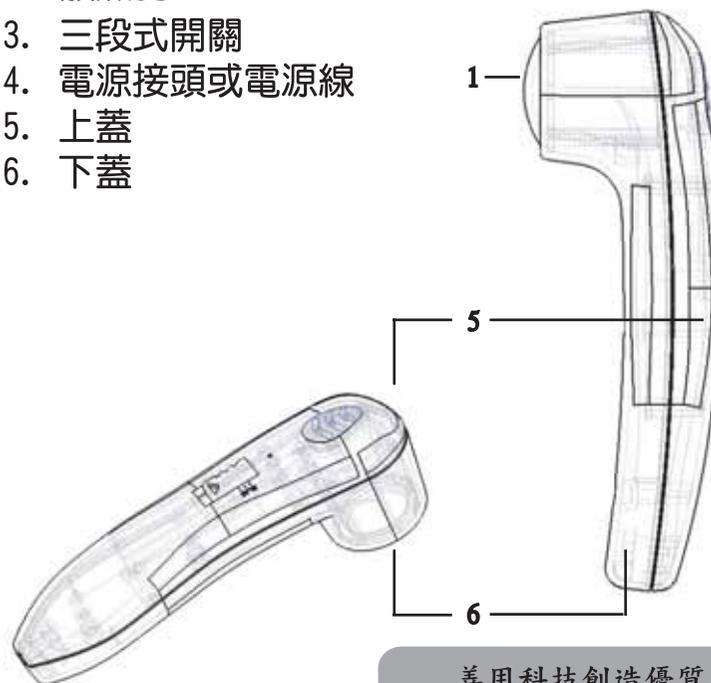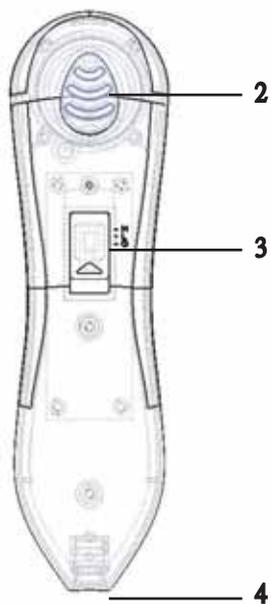

P 1

善用科技創造優質生活環境

## 規格與特點 (MS-05 脈衝離子美容儀)

### 規格: (MS-05 脈衝離子美容儀)

- 電力來源 : AC 100~110V or AC 220~240V or DC 12V(依銷售區域)
- 耗能 : 僅 1.5 Watts
- 低頻電流脈衝波輸出 : H: DC 20KV L: DC 15KV
- 臭氧輸出 : 0.015ppm
- 尺寸 : 總長度 18 cm, 高度 5.5 cm(按摩頭區)

### 特點: (MS-05 脈衝離子美容儀)

- 應用獨家專利真空光管技術, 攜帶方便, 即插即用.
- 採用符合人體工學設計開發的舒適按摩頭, 內設置脈衝離子能量及紅色動力光輸出
- 是一種綜合微量臭氧產生器及電刺激器的高科技產品.
- 低頻脈衝波+離子導入+臭氧殺菌, 可用於美容護膚, 深層按摩, 活化細胞
- 微量臭氧可產生殺菌, 消毒, 淨化之功效, 因此對於青春痘, 小傷口殺菌活化, 蚊蟲咬傷殺菌等均有幫助.
- 低頻脈衝波及能量光使肌膚及保養品活化(離子化), 刺激深層加強吸收
- 強化塑質安全按摩頭, 非一般玻璃燈泡, 可以適度力道做深層壓按式按摩

## 使用方式 (MS-05 脈衝離子美容儀)

殺菌 電氣刺激 止癢 消毒(抗痘)	將脈衝離子美容儀之按摩頭以蜻蜓點水方式輕觸皮膚, 若需加強電刺激, 請在皮膚上塗上少許清水, 效果更為顯著. 假如皮膚處於敏感狀態, 輕微電刺激仍感不適, 應俟皮膚恢復後再行使用.
離子導入 電流低頻脈衝波 紅色動力光	先將臉部及頸部或其他部位皮膚上塗好保養品和瘦身霜之類, 再將脈衝離子美容儀之按摩頭在保養品上輕輕滑動, 使保養品接受按摩頭放出的能量, 再逐漸略為加強按摩之力道. 每次以做五分鐘為宜, 一般不應超過十分鐘.
穴道刺激 肌肉按摩	在肌肉、穴道或酸、痛、麻處以適當力道按摩刺激

P 3

## 注意事項 (MS-05 脈衝離子美容儀)

- 請勿連續使用超過30分鐘, 使用後請務必將插頭(電源)拔掉, 並將按摩頭徹底清潔.
- 體內有電子輔助設備(例如心律調整器)者, 請勿使用. 按摩部位如配戴有金屬首飾, 請於使用前取下.
- 孕婦、嬰兒、心臟病、高血壓... 等除非先徵詢專業醫生, 否則不建議使用.
- 請勿於人體脆弱處(如眼睛)使用.
- 本產品為專業輔助性器材, 並非醫療器材, 無需特殊訓練即可使用, 惟兒童請在成人監護下使用.
- 若皮膚處於敏感狀態, 降低至輕微電刺激仍感不適, 應俟皮膚恢復後再行使用.
- 本機內裝置精密電氣零件, 請勿水洗或擅自拆卸.

## 規格 (MS-05a 美顏動力光系列)

規格: (MS-05a 美顏動力光系列)

- 電力來源 : DC 4.5V
- 耗能 : 僅 1.5 Watts
- 光源 : 符合動力光特殊波長 LED 9顆
- 波長 : 暖紅色動力光:  $628 \pm 3\%$  nm  
藍紫色動力光:  $408 \pm 3\%$  nm  
(暖紅光與藍紫光為不同產品, 可依需要選購)
- 微電腦控制
  - H: 動力光同時輸出, 9LED齊亮
  - L: 動力光間歇脈衝輸出, 5LED及4LED分別閃亮
- 定時裝置 : H 及 L 均自動定時20分鐘
- 提示音效 : 定時結束自動播放音樂提醒
- 尺寸 : 總長度 18 cm, 高度 5.5 cm(動力光區)

美麗小格言 :

徹底清潔殺菌是  
一切美容保養的  
基礎.

## 特點及使用方式 (MS-05a 美顏動力光系列)

### 特點: (MS-05a 美顏動力光系列)

- 外型採用符合人體工學設計開發.
- 真正符合動力光波長.
- 非侵入式, 漸進式改善, 不需要擦任何介質.
- 安全、可靠、無負作用.
- 自動定時, 與醫療級療程相同, 可在家輕鬆使用.

### 美麗小格言：

只有懶女人沒有  
醜女人，善用科  
技讓您事半功倍  
輕鬆美麗

### 使用方式: (MS-05a 美顏動力光系列)

- 將美顏動力光輕置於臉上集中照射或保持3~10cm距離照射。(注意切勿直接照射眼睛)
- 依需要選擇 H:動力光同時輸出, 或 L: 間歇脈衝輸出.
- 非侵入式, 原則可每天使用乙次, 但仍需依膚質狀況調整使用頻率.
- 具自動定時, 使用後請將開關撥回OFF, 並將電源拔掉.

## 注意事項 (MS-05a 美顏動力光系列)

- 請使用原廠提供之專用電源轉換器, 否則可能造成機器損壞.
- 本機為微電腦控制, 使用後請務必將電源拔掉, 並徹底清潔.
- 請勿將光線直射眼睛.
- 孕婦、嬰兒、心臟病、高血壓... 等除非先徵詢專業醫生, 否則不建議使用.
- 本產品為專業輔助性器材, 並非醫療器材, 無需特殊訓練即可使用, 惟兒童請在成人監護下使用.
- 若皮膚處於敏感狀態, 應俟皮膚恢復後再行使用.
- 自動定時結束後, 請將開關撥至OFF.
- 本機內裝置精密電氣零件, 請勿水洗、擅自拆卸或在潮濕環境使用.

## 附錄

### 動力光參考資料

國外動力光網站 <http://www.phototherapeutics.com/>

重要內容摘述: FDA Approves First LED System for Treatment of Acne  
Tuesday 1 July, 2003 (美國聯邦食品藥物管理局核准動力光用於青春痘治療)

動力光相關新聞:請由 <http://www.google.com.tw> 中鍵入關鍵字「動力光 美容」查詢


重要內容摘述: 動力光醫療美容 紅光縮毛孔、藍光可戰痘  
動力光、脈衝光及雷射之比較表(摘錄)

	動力光	脈衝光	雷射
副作用	幾乎沒有	較少, 能量太高, 易有 水泡進而返黑	易有傷口、返黑
價格/次	2,000元	10,000元	5,000元
療程	一周2~3次, 療程共6次	一個月一次, 共6次	視色素深淺, 1~3次
建議使用 對象	細紋、毛細孔大者、 青春痘及顏面手術後者	黑斑〈淺斑〉、膚色 不均勻、微血管擴張	除斑、微血管擴張、 胎記

P 8

# 附錄

## 手部按摩區

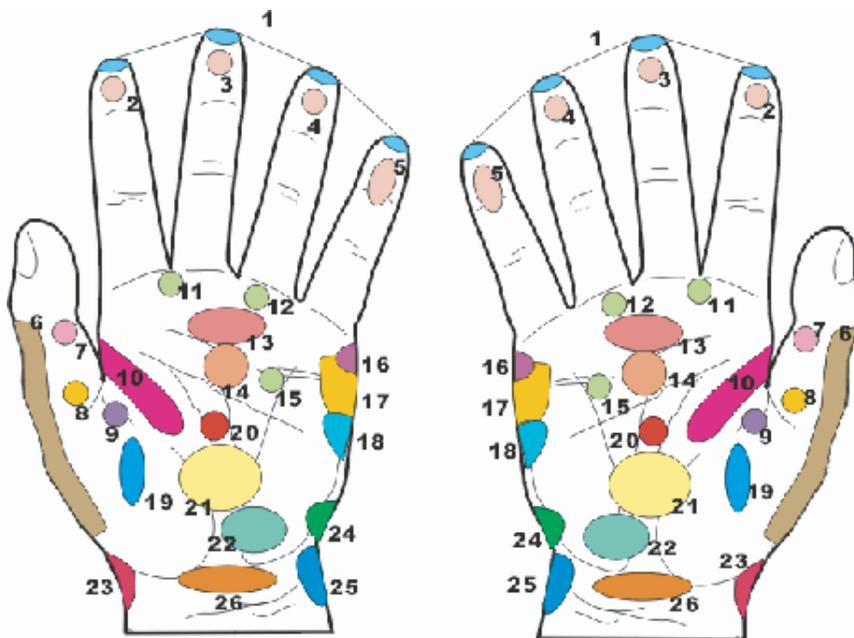


1. 鼻竇
2. 肝臟 (1)
3. 心
4. 肺 (1)
5. 腎 (1)
6. 脊椎
7. 頭
8. 脖子
9. 喉嚨 (懷孕禁用)
10. 胃
11. 耳朵
12. 肺 (2)
13. 眼
14. 腎 (2)
15. 胰
16. 肩膀
17. 肝臟 (2)
18. 膽
19. 甲狀腺
20. 停止打嗝
21. 腸
22. 膀胱
23. 攝護腺、陰莖(男) 子宮(女)
24. 臀部
25. 睪丸(男) 卵巢(女)
26. 腰

註：整理自中國古代相關典籍資料

# 附錄

## 腳底反射區

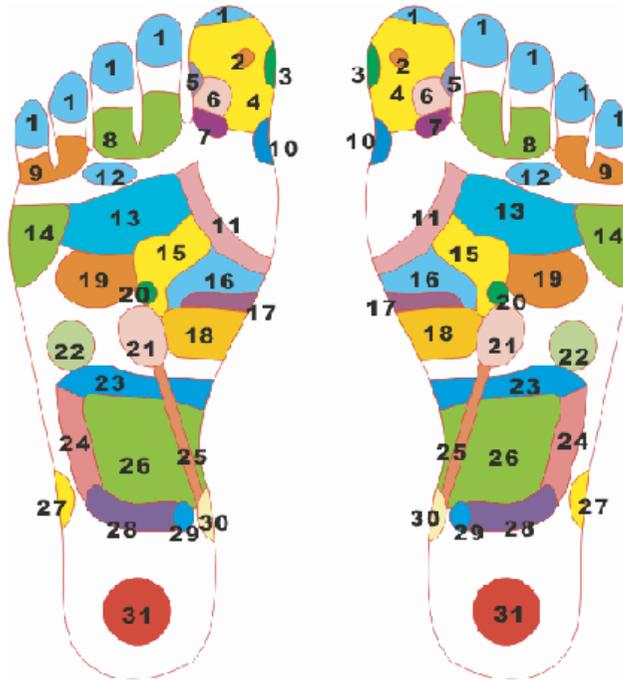

1. 竇
2. 腦下垂體
3. 鼻子
4. 大腦
5. 太陽穴
6. 延髓、小腦
7. 脖子
8. 眼睛（右腳為左眼；左腳為右眼）
9. 耳朵（右腳為左耳；左腳為右耳）
10. 副甲狀腺
11. 甲狀腺
12. 僧帽肌（覆蓋頸部到背脊的肌肉）
13. 肺、氣管
14. 肩
15. 太陽神經
16. 胃
17. 十二指腸
18. 胰臟
19. 心臟
20. 腎上腺
21. 腎臟
22. 脾臟
23. 橫結腸
24. 降結腸
25. 輸尿管
26. 小腸
27. 膝（右腳為右膝；左腳為左膝）
28. 直腸
29. 肛門
30. 膀胱
31. 睪丸(男)卵巢(女)

P 10

註：整理自中國古代相關典籍資料

善用科技創造優質生活環境